

Совершенная комбинация

UBIPACK
GYN




SOPRO
COMEG

UBIPAC

UBICAM

USB камера для диагностики

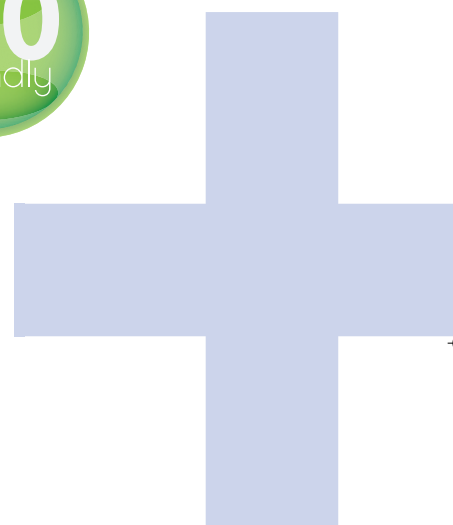

Совместимость

Ubicam совместим со всеми:

- Жесткими эндоскопами
- Гибкими эндоскопами
- Кольпоскопами*



Передовые технологии

Новая технология Intelligent Control Endoscope оптимизирует все параметры изображения в соответствии с используемым эндоскопом.

Эта уникальная функция анализирует в реальном времени:

- Размер эндоскопа
- Цветовую температуру
- Освещенность



iCe
technology

* Оснащенные разделителем луча



UBiled

Мощный, компактный и ультра эффективный

Светодиодный источник света

UBILED имеет компактную конструкцию и привлекательный дизайн:

- Световой поток сравним с лампой 100 Ватт хелон
- Время жизни светодиода - 50 000 часов
- Значительно уменьшено тепловыделение
- Превосходное освещение в любых условиях
- Оптимальная цветовая температура
- Простой в использовании





Программа захвата изображений и ведения базы пациентов

Огромная популярность на протяжении многих лет, интерфейс на 25-ти языках, включая русский, новый обновленный дизайн и улучшенная эргономика.


Какими бы не были Ваши требования, **sopro imaging** — это решения для Вас.



Множество инструментов

- Захват цветных изображений и видео роликов
- Печать медицинских отчетов
- База пациентов
- Комментарии
- Экспорт изображений и роликов


Созданная для Ubrask, тележка Ubicart прекрасно впишется в любое помещение

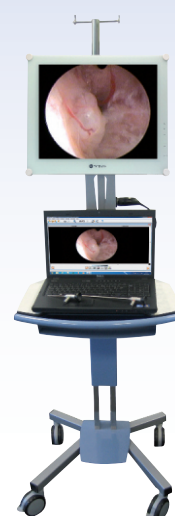

K GYN

Гистероскоп

Гистероскоп 30°, ø 2,7 мм, длина 300 мм, автоклавируемый (протестирован на 500 циклах), стержне-линзовая система.

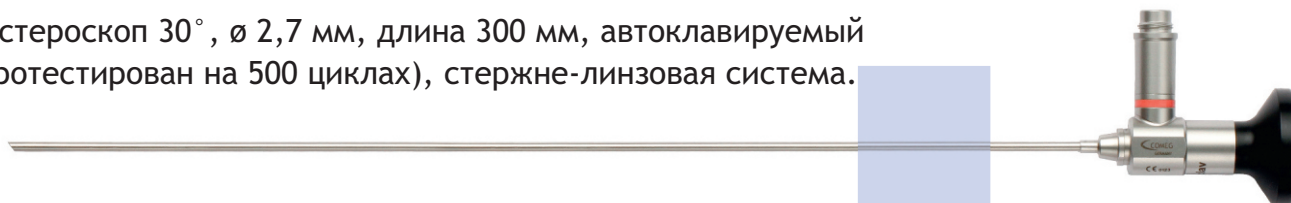

Операционный тубус

Операционный тубус непрерывного потока 14.9 Fr. с двумя вращающимися кранами позволяет проводить любые гистероскопические процедуры, такие как биопсия, удаление IUD, стерилизация методом Essure и др. благодаря рабочему каналу 5 Fr.



or



Диагностический тубус

Тубус 10 Fr. для офисной диагностической гистероскопии.



UBIPACK_{GYN}

Состоит из следующих компонентов:

UBICAM_{digital diagnosis set}

- Сенсор: высокочувствительный CCD 1/4"
- Разрешение: (752 x 582) PAL - (768 x 494) NTSC
- Четкость: 470 линий
- Чувствительность: 2 lux
- Баланс белого: технология iCe
- Улучшение видео
- Электронный антимаршевый фильтр для гибких фиброскопов
- Автоматическое сохранение настроек
- 2 кнопки управления
- Длина кабеля: 3 метра, Ø5 мм
- Выход USB 2.0
- Влагозащищенная головка камеры
- C-Mount
- Размер: длина = 87 мм; Ø = 30 мм
- Вес: 210 граммов
- Питание: 5 V DC
- Потребляемая мощность: 2.5 VA

	CAMERA UBICAM	1 CCD CAMERA
ON	1 W	25 W

Потребление UBICAM и стандартной камеры

UBiled

- Светодиодная LED технология
- Номинальная мощность: 30 Вт (световой поток 100 Вт хелон)
- Цветовая температура: > 4500° K
- Время жизни светодиода: 50.000 часов
- Режим ожидания с памятью уровня освещенности
- Электронная диафрагма
- Защитная система с датчиком световода
- Автоматическая система защиты от перегрева
- Регулировка интенсивности света
- Размер: Д: 180 мм; Ш: 95 мм; В: 35 мм
- Вес: 320 граммов
- Потребляемая мощность: 30 VA
- Напряжение питания: 115 В или 230 В~ / 50 или 60 Гц
- Световод с коннекторами системы Storz/Storz 2,5 м; Ø 4,8 мм

	UBILED LIGHT SOURCE	XENON LIGHT SOURCE
ON	41 W	150 W

Потребление источников света LED и Xenon

Операционный набор

- Ref : 191 273 202 - 14.9 Fr. тубус непрерывного потока рабочая длина: 220mm; 2 вращающихся краника
- Ref : 163 282 992 - гистероскоп передне-бокового видения 30°; Ø 2.7mm; длина 301mm; автоклав.

or

Диагностический набор

- Ref : 191 273 052 - 10.5 Fr. тубус диагностический 30°; 1 вращающийся краник
- Ref : 163 282 992 - гистероскоп передне-бокового видения 30°; Ø 2.7mm; длина 301mm; автоклав.

sopro Imaging

Рекомендованная конфигурация компьютера

Операционная система: Windows 7

Процессор Intel Core2

ОЗУ: 2 Гб

Жесткий диск : 250 Гб

Порты USB: 2 порта USB 2.0 Hi-Speed

Видеокарта на чипсете NVIDIA или ATI

видеопамять 512 Мб, поддержка DirectX 9 или выше

USB чипсет: Intel или NEC

Разрешение экрана: 1280 x 1024 или выше

Компьютер должен соответствовать IEC60950 или IEC 60601-1



E-mail: info.ru@sopro-comeg.com • www.sopro-comeg.com